

DIE RICHTIGE WAHL FÜR GROSSE MENGEN. THE RIGHT CHOICE FOR LARGE QUANTITY APPLICATIONS.



RBP BAUER DEBLISTERING.

Die Mehrzahl unserer Kunden entscheidet sich für das Modell D3600 zur Erhöhung der Chargenausbeute an jeder Blisterlinie. Ausgerüstet mit Geschwindigkeitsregulierung, Magazin-Füllhöhenüberwachung, Füllstandssensoren, Zähler und den blisterspezifischen Formatsätzen werden die Arzneimittel den fehlgefüllten Blistern schonend und GMP-gerecht entnommen und können der aktuellen Charge unverzüglich wieder zugeführt werden.

Die D3600 ermöglicht alle Verarbeitungsvarianten - quer, lang, diagonal, je nach Wölbung der Blister oder Anordnung der Näpfe. Unterschiedliche Produktreihen (Mehrphasenblister) können getrennt aufgefangen werden. Der Einsatz einer Handzuführungseinrichtung (z. B. bei extrem gewölbten Blistern) ist ebenfalls gegeben. Mit der gegenläufigen Bürstenwalze werden auch kleine Produkte aus großen Alu/Alu-Näpfen sicher entleert.

Optional kann die Maschine an Ihre zentrale Absaugung angeschlossen werden.


Most of our customers have a D3600 installed near every blister line to improve their batch yield. Equipped with speed control, magazine level monitoring, level sensors, counter and product-specific tool sets the machine ensures gentle and GMP-compliant recovery of pharmaceuticals which can thus be returned to the current production cycle.

The D3600 can handle push-through blisters lengthwise, crosswise or diagonally, depending on the pocket position and the convexity of the blisters. Different product raws can be recovered separately. It is also possible to use a manual feeder (e. g. for extremely blisters). An optional brush roll working in opposite direction ensures the safe recovery of small products from large Al/Al pockets.

Optionally this machine can be plugged to your central vacuum system.



D3600

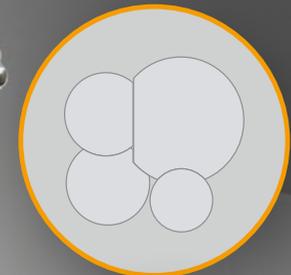

DEBLISTERING MADE EASY!

Blisterentleerung Professionell. Effizient.

Effiziente Blisterentleerung hat einen Namen:

RBP Bauer Deblistering.

Nach über 4000 gefertigten Formatsätzen ist uns heute keine Blistervariante mehr fremd. Dennoch stellen wir uns mit Ehrgeiz und Freude jeder neuen Herausforderung.

Sprechen Sie mit uns: Wir finden für jedes Entleerungsproblem eine Lösung!
Gerne informieren wir Sie über technische Aspekte, Leistungsdaten und Kosten.

Tel: +49-2251-77478-0

Modell	D3600
Verwendung für	Durchdrückbare Blister
Varianten	1.) Auf fahrbarer Edelstahl-Arbeitsstation 2.) Auf offenem Edelstahl-Unterbau und seitlich eingebautem Schaltschrank
Maße (L x B x H)	1.) 950 mm x 500 mm x 1100 mm 2.) 550 mm x 480 mm x 1150 mm
Gewicht ca.	1.) 110 kg 2.) 70 kg
Leistung	Stufenlos bis zu 60 Blister/Min
Formatbereich (B x L)	150 mm x 120 mm
Formatsätze	3 kg
Anschlussspannung	110/230 V AC / 50-60 Hz
Steuerspannung	24 V DC
Formatwechsel ca.	3 min
Bemerkungen	GS Nr. 04119



In allen RBP-Maschinen und blisterspezifischen Entleerungswerkzeugen steckt unser gesamtes Know-how. Bei der Fertigung werden ausschließlich Bauteile und Materialien verwendet, die wir sorgfältig ausgesucht sowie gewissenhaft getestet haben und deren Qualität den strengen Anforderungen der Pharmaindustrie entspricht. Alle RBP-Maschinen werden bei Auslieferung voreingestellt und können mit einigen Handgriffen unverzüglich in Betrieb genommen werden. Wenn es für Sie von Vorteil ist, bieten wir Ihnen die Inbetriebnahme, die Einweisung und die Schulung Ihres Personals auch vor Ort sowie eine Validierungsunterstützung gemäß Ihrer Spezifikation an. Sie erhalten zu jeder RBP-Maschine eine umfangreiche Dokumentation bestehend aus einer leicht verständlichen, reichlich bebilderten Betriebsanleitung, einem Schaltplan mit Stücklisten, dem Maschinen-Layout und einer EU-Konformitätserklärung einschließlich einer Liste der verwendeten Materialien. Und selbstverständlich gewähren wir auf alle RBP-Maschinen sowie auf unsere Formatsätze zwei Jahre Garantie.

Deblistering Professional. Efficient.



Efficient deblistering has a name:

RBP Bauer Deblistering.

With more than 4000 different sets of tooling sold to date, we have handled any conceivable type of blister. But even with this record, we are still looking forward to new challenges.

RBP Bauer has the right answer to all of your deblistering needs!
We will be pleased to talk to you about technical aspects, specifications and costs.

Tel: +49-2251-77478-0

Model	D3600
In use for	Push through packs
Versions	1.) Mounted on mobile stainless steel workstation 2.) Open stainless steel workstation and attached switchgear cabinet
Size (L x W x H)	1.) 950 mm x 500 mm x 1100 mm 2.) 550 mm x 480 mm x 1150 mm
Weight approx.	1.) 110 kg 2.) 70 kg
Output	infinitely variable, up to 60 blisters/min
Format range (W x L)	150 mm x 120 mm
Tool sets	3 kg
Supply voltage	110/230 V AC / 50-60 Hz
Control voltage	24 V DC
Tooling changeover approx.	3 min
Comments	GS-Nr. 04119



All RBP-machines and deblistering tools are a testimony to our comprehensive know-how. We only use carefully selected and thoroughly tested quality parts and materials in accordance with the pharmaceutical industry's demanding standards. All RBP-machines are factory-set on delivery and can be commissioned immediately with minimum start-up effort. On request, we can offer you setup and on-site training services as well as validation support according to your specification. All RBP-machines come with a comprehensive set of documentation comprising easily understandable and richly illustrated operating instructions, a circuit diagram with part lists, the machine layout and an EU Declaration of Conformity including a list of the used materials. All RBP-machines and change parts are covered by a product warranty of two years. Of course, you can rely on our continued customer support after this period, should any problems occur.